

EASYPIX

PULSE OXIMETER



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie finden diese Anleitung auch online unter dem folgend angegebenen Link:

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

www.bit.ly/pulse-po2

Beschreibung

Ein Pulsoximeter ist ein gebräuchliches Gerät zur Überprüfung der Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Pulsfrequenz. Es handelt sich um ein kompaktes, zuverlässiges und langlebiges Überwachungsgerät mit OLED-Display, das mit 2x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Pulsoximeter ist ein wiederverwendbares Gerät und ist für die stichprobenartige Überprüfung der Pulssauerstoffsättigung und Pulsfrequenz von Erwachsenen

vorgesehen.

Es sollte nicht zur kontinuierlichen Überwachung verwendet werden - dies sollte nur unter Anleitung Ihres Arztes erfolgen.

Einschränkungen

⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des Geräts ist nur für Erwachsene bestimmt. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht an Kindern, Kleinkindern und Neugeborenen.

Warnung vor den Kleinteilen

Das Produkt ist aufgrund der Erstickengefahr nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sicherheitshinweise

Die Person, die das Pulsoximeter verwendet, muss die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen haben.

Dieses Produkt sollte nur verwendet werden, um einen Richt- oder Referenzwert abzulesen. Es sollte ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt nicht zur Bestimmung einer Diagnose verwendet werden. Eine längerfristige oder laufende Anwendung sollte nur unter Anleitung Ihres Arztes erfolgen.

Wenn Sie bei der Anwendung irgendwelche Beschwerden verspüren, hören Sie bitte sofort auf und suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

Bei der Anwendung des Pulsoximeters sollte der Anwender auf die Sicherheit des zu messenden Patienten achten und diese gewährleisten.

Das Pulsoximeter verfügt nicht über eine Alarmfunktion. Es sollte nicht zur kontinuierlichen Überwachung über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

Geschädigtes Hautgewebe kann nicht gemessen werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in diesem Handbuch beschrieben.

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie das Pulsoximeter nicht in der MRT- oder CT- (Computertomographie) Umgebung, da der induzierte Strom möglicherweise Verbrennungen verursachen könnte.

Das Gerät darf vom Endbenutzer in keiner Weise modifiziert, repariert oder gewartet werden.

Verwenden Sie das Pulsoximeter nicht in Gegenwart von entflammenden Anästhetika, explosiven Substanzen,

Dämpfen oder Flüssigkeiten.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch immer sauber und frei von Schmutz ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.

Verwenden Sie zur Desinfektion oder Reinigung des Geräts weder hohen Druck noch hohe Temperaturen. Verwenden Sie niemals andere als die empfohlenen Reinigungs-/Desinfektionsmittel.

Das Gerät ist eine werkseitig versiegelte Einheit. Halten Sie seine Oberfläche trocken und sauber und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.

Das Pulsoximeter ist ein Präzisionsgerät. Vermeiden Sie Druck, Stöße, starke Vibrationen oder andere mechanische Beschädigungen. Bitte lagern Sie das Gerät sicher, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Befolgen Sie bei der Entsorgung des Pulsoximeters und des Zubehörs die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung eines solchen Geräts und Zubehörs. Nicht wahllos entsorgen.

Verwenden Sie AAA-Alkalibatterien.

Verwenden Sie keine Kohlenstoffbatterien oder Batterien minderer Qualität. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Vermeiden Sie vor der Verwendung des Pulsoximeters die Exposition gegenüber statischer Elektrizität.

Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Funkempfängern fern.

Um eine verstärkte elektromagnetische Strahlung zu vermeiden oder die Leistung bei anti-elektromagnetischen Störungen zu verringern, verwenden Sie das Gerät nur wie konfiguriert.

Tragbare und mobile Funkfrequenz-Kommunikationsgeräte können den normalen Gebrauch des Pulsoximeters beeinträchtigen.

Lagerumgebung

Das Pulsoximeter sollte nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte stehen oder zusammen mit diesen gelagert werden.

Bewahren Sie das Gerät und Kleinteile wie z.B. Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie immer auf eine geeignete Überwachung von Patienten oder anderen Personen, wenn das Gerät an einem Schlüsselband verwendet wird.

Lieferumfang

Pulsoximeter, Umhängeband, Bedienungsanleitung EN/DE

Technische Daten

- OLED-Display
- SpO₂: Messbereich: 70-100% Genauigkeit: ±2% (70%-99%)
- Pulsfrequenz: Messbereich: 30-240bpm Genauigkeit: ±2bpm
- Spannung: DC3V
- Batterietyp: 2x 1.5V AAA Batterien sind erforderlich (nicht im Lieferumfang inbegriffen)
- Leistung: < 30mA
- Automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
- Bluetooth 4.0
- Betriebsumgebung: 5°-40°C Lagerumgebung -10°-40°C Luftfeuchtigkeit: 15%-80% Luftdruck: 70kPa-106kPa
- Maße: 58 x 32 x 34 mm
- Gewicht: 50g (mit zwei AAA-Batterien)

Produktbeschreibung




POWER- / FUNKTIONSTASTE

Beschreibung der Funktionen

Der Pulsoxymeter dient zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und des Puls. Die Sauerstoffsättigung gibt an, wie viel Prozent des Hämoglobins im arteriellen Blut mit Sauerstoff beladen sind.

Das Pulsoximeter verwendet zur Messung zwei Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen, die im Gehäuseinneren auf den eingelegten Finger treffen und bei der Messung ins Verhältnis gesetzt werden. Daraufhin wird die arterielle Sauerstoffsättigung ausgerechnet und übersichtlich auf dem Pulsoximeter angezeigt.

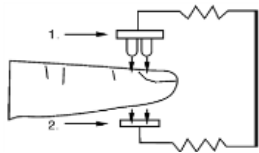

1. Infrarotes Licht aussendend
2. Infrarot-Lichtempfänger

Messung vornehmen

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterien ein. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder sicher an.

2. Drücken Sie die Power-/Funktionstaste, um das Gerät einzuschalten.

3. Drücken Sie ein Ende des Geräts, um es zu öffnen, und legen Sie einen Zeigefinger hinein. Lassen Sie das Gerät vorsichtig am Finger schließen, wie in Abbildung 2. (Zeige-, Mittel- oder Ringfinger können für eine Lesung verwendet werden). Halten Sie den Finger und das Gerät mit so wenig Bewegung wie möglich still und lassen Sie das Gerät eine Messung durchführen.

HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass der Finger weit genug in den Sensor eingeführt wird, so dass der Fingernagel genau gegenüber dem vom Sensor ausgestrahlten Licht liegt.



Abb. 1

Abb. 2

HINWEIS!

Führen Sie SpO₂-Überwachung und NIBP-Messungen (nicht-invasive Blutdruckmessung) nicht gleichzeitig am selben Arm durch. Eine Behinderung des Blutflusses während NIBP-Messungen kann das Ablesen des SpO₂-Wertes nachteilig beeinflussen.

Verwenden Sie das Pulsoximeter nicht zur Messung von Patienten, deren Pulsfrequenz niedriger als 30bpm ist, da dies zu falschen Ergebnissen führen kann.

Stellen Sie sicher, dass keine Kontamination und/oder Narbe am getesteten Finger vorhanden ist, da das angezeigte

Ergebnis aufgrund des vom Sensor empfangenen Signals falsch sein kann.

Wenn das Produkt bei verschiedenen Patienten verwendet wird, neigt es zu Kreuzkontaminationen, die vom Benutzer verhindert und kontrolliert werden sollten. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung bei anderen Patienten zu desinfizieren.

Die höchste Temperaturschwelle, bei der der Sensor mit der Haut eines Patienten in Kontakt kommt, liegt bei 41° C. Eine wiederholte Anwendung kann die Verwendung verschiedener Finger erfordern, um eine genaue Messung zu erhalten.

Drehen des Bildschirms

Um die Anzeige zum bequemen Ablesen zu drehen, drücken Sie nach der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm einmal kurz die "Power/Funktion" -Taste.

Automatische Abschaltung

Das Produkt schaltet sich automatisch ab, wenn 10 Sekunden lang kein Signal erkannt wird.

Faktoren, die die Messgenauigkeit beeinflussen

Eine falsche Platzierung des Fingers kann die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen.

Die Messungen hängen auch von der Absorption eines speziellen Wellenlängenstrahls durch oxidiertes Hämoglobin und Desoxyhämoglobin ab. Die Konzentration von nichtfunktionellem Hämoglobin kann die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen. Im Zweifelsfall immer einen Arzt konsultieren.

Schock, Anämie, Hypothermie und die Anwendung eines gefäßverengenden Medikaments können den arteriellen Blutfluss auf ein nicht messbares Niveau senken.

Pigment oder Farbe (z.B.: Nagellack, künstliche Nägel, Farbstoff oder pigmentierte Creme) können zu ungenauen Messungen führen.

Übertragung der Messergebnisse auf Ihr Smartphone (via Bluetooth)

Dank der integrierten Bluetooth-Funktion können Sie die Messergebnisse auf Ihr Smartphone übertragen. Sie können sie speichern, verschicken oder mit anderen teilen.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ein.
2. Laden Sie die App „SMART WEAR“ runter und installieren Sie sie auf dem Smartphone.



ANDROID



IOS

3. Folgen Sie bei der Installation den in der App beschriebenen Schritten und stellen Sie die Verbindung zum Gerät SP001 her.

4. Der Pulse Oximeter überträgt automatisch die nächste Messung in die App.

5. Dort können Sie die Messung als Bild speichern, verschicken oder mit anderen teilen.

Anbringen des Hängebands

1. Fädeln Sie das dünnere Ende des Bandes durch das Loch an der Seite.

2. Fädeln Sie das dickere Ende des Bandes durch das eingefädelt Ende, bevor Sie es fest anziehen.

Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit Baumwolle oder einem feuchten, weichen Tuch.

Nach der Reinigung trocken abwischen und an der Luft trocknen lassen.

Desinfektion

Zu den empfohlenen Desinfektionsmitteln gehören: Ethanol 70%, Isopropanol 70%, Glutaraldehyd (2%) Lösungsdesinfektionsmittel.

1. Reinigen Sie das Produkt wie oben beschrieben.
2. Desinfizieren Sie das Produkt mit Baumwolle oder einem weichen Tuch, das mit einem der empfohlenen Desinfektionsmittel befeuchtet ist.
3. Nach der Desinfektion wischen Sie das auf dem Produkt verbliebene Desinfektionsmittel mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
4. Lassen Sie das Produkt an der Luft trocknen.

⚠️ WARNUNG

Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeit ein.

Wir empfehlen, das Produkt bei Bedarf oder bei Verwendung bei verschiedenen Patienten zu reinigen und zu desinfizieren.

Verwenden Sie niemals andere als die empfohlenen Reinigungs-/Desinfektionsmittel.

Lassen Sie niemals eine Hochdruck- und Hochtemperatur-

Desinfektion des Geräts zu.

Schalten Sie das Gerät immer aus und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen oder desinfizieren.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten

innerhalb der Europäischen Union.

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der europäischen Richtlinien angebracht wurde. Die Konformitätserklärung kann hier runter geladen werden:

www.easypix.info/download/pdf/doc_pulseoximeter_po2.pdf

Diese Erklärung wird verantwortlich für den

Hersteller/Importeur
easypix GmbH
Em Parkveedel 11
50733 Köln, Germany



EASYPPIX | LIFESTYLE ELECTRONICS